

Supreme Air Venturi

Campanas de extracción de laboratorio



KEWAUNEE®

fomentamos nuevos descubrimientos...*En todo el mundo*

VENTURI

La campana extractora de última generación

- Tecnología de contención mejorada sin igual Venturi
- Tope electromecánico de hoja
- Luces LED con ajuste de color e intensidad
- Único sistema de hoja ultrasuave
- Altura de visualización excepcional
- Airfoil al ras
- Alto rendimiento/eficiencia energética
- Múltiples alturas, profundidades y anchos
- Amplia gama de accesorios y opciones
- La altura de la campana de la ADA coincide con las campanas adyacentes

La campana extractora de gases de tecnología más avanzada del mercado

Supreme Air Venturi utiliza técnicas probadas para mejorar la contención junto con innovadoras características de comodidad para el laboratorio.

- Luces LED ajustables
- Tope electromecánico de hoja
- Sistema de hoja ultrasuave
- Administración de la hoja con botón pulsador

Supreme Air Venturi es la campana extractora más segura y fácil de usar fabricada hoy en día.


Bypass superior de barrera dinámica
para una cortina de aire segura y sin contaminantes detrás de la hoja con un mínimo de turbulencia superior

Ranuras verticales del deflector
para mejorar el flujo de aire lineal a través de la abertura frontal

Airfoil de flujo de aire convergente
Montado al ras para un fácil acceso, que proporciona un flujo de aire de barrido a través de la superficie de trabajo.

Puerto Venturi
Acelera el flujo de aire en las esquinas inferiores de la abertura de la campana para mejorar la contención.

Tipos de campanas extractoras Venturi

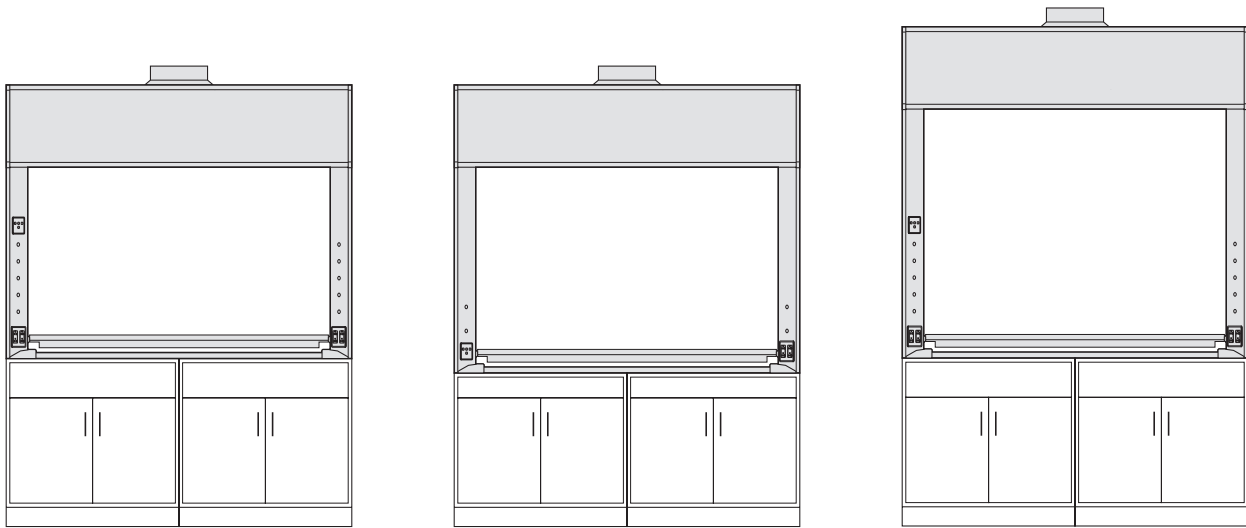

Campana de extracción de uso general Campana de banco ADA Campana de banco serie LX

	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja
Hoja vertical	•	•	•
Hoja de combinación	•	•	•
Hoja horizontal	•	•	•
	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento
KMER	•	•	•
Kemglass	•	•	•
Resina fenólica	•	•	•
Acero inoxidable de tipo 304L	•	•	•
Acero inoxidable de tipo 316L	•	•	•
Alturas de apertura de la hoja	28"	28"	28" - 35"
Profundidades internas	24" - 30" - 36"	24"	24" - 30" - 36"
Longitudes generales	48" - 60" - 72" - 96"	48" - 60" - 72"	48" - 60" - 72" - 96"

Características de la campana extractora Venturi



Controlador de parada de luz y hoja

Características generales

- Contención sin igual
- Bajo flujo/alto rendimiento
- Eficiencia energética
- El diseño de poste Venturi mejora el flujo de aire en las esquinas
- Altura de visualización de 38 1/2"
- Iluminación interior LED con 15 ajustes de intensidad y 3 ajustes de color
- Tope electromecánico integrado en el riel de la hoja
- Airfoil al ras para un fácil acceso
- Paneles de acceso con juntas fácilmente extraíbles
- Dos tomacorrientes dúplex protegidos con GFCI en cada poste de esquina
- Espacio para cinco accesorios de servicio por poste lateral
- Mango de la hoja con muescas en cada extremo para paso de cables



Puerto Venturi y manilla de hoja con muescas

Sistema de polea y hoja accionado por correa

- Sin mantenimiento, eje doble, accionado por correa y engranaje, sistema de hojas que utiliza cojinetes lineales en el riel de la hoja para una operación suave



- Probado hasta 300,000 ciclos



Tipos y opciones de campanas extractoras Venturi de Kewaunee

Tipos de campanas extractoras Venturi	
V05	Campana de extracción de laboratorio de uso general con hoja vertical elevable sin marco de 28" Profundidad: 24"-30"-36" Longitud: 48"-60"-72"-96"
V06	Campana de extracción de banco para combinación con hoja combinada elevable/horizontal de 28" Profundidad: 24"-30"-36" Longitud: 48"-60"-72"-96"
V07	Campana de extracción de banco con hoja horizontal con hoja horizontal de cuatro paneles sin marco de 31" Profundidad: 24"-30"-36" Longitud: 48"-60"-72"-96"
V15	Campana de extracción de banco ADA con hoja vertical elevable sin marco de 28" Profundidad: Longitud de 24": 48"-60"-72"
V16	Campana de extracción de banco ADA con hoja combinada vertical/horizontal de 28" Profundidad: 24" Longitud: 48"-60"-72"
V25	Campana de extracción de banco serie LX con hoja vertical elevable sin marco de 28" y 35" Profundidad: 24"-30"-36" Longitud: 48"-60"-72"-96"
V26	Campana de extracción de banco serie LX con hoja combinada vertical/horizontal de 28" y 35" Profundidad: 24"-30"-36" Longitud: 48"-60"-72"-96"

Opciones estándar

Revestimiento KMER
 Revestimiento de Kemglass
 Revestimiento de acero inoxidable
 Revestimiento de resina fenólica
 Hoja de seguridad de vidrio laminado
 Hoja de seguridad de vidrio templado
 Accesorios de válvula de aguja controlada por varilla
 Accesorios de válvula de bola controlada por varilla
 Accesorios de válvula de aguja de carga frontal
 Bypass de volumen de aire variable (VAV)
 Alarma Air Alert 600
 Alarma Air Alert 300
 Etiqueta de tope de la hoja
 Rack de destilación
 Protector de seguridad
 Pantalla de filtrado
 Tomacorrientes GFCI de grado especificado
 Tomacorrientes GFCI de grado hospitalario
 Interruptor de ventilador/soplador
 Precableado
 Plomería preinstalada
 Airfoil de acero inoxidable
 Tiradores de hoja de acero inoxidable
 Collar de conducto de acero inoxidable
 Puerto de cable
 Retorno automático de hoja
 Operador automático de hoja



Kewaunee Scientific Corporation se dedica a fabricar productos de alta calidad para el mercado de laboratorios. Ofrecemos soluciones de laboratorio totales, diseños innovadores y experiencia tecnológica a través de una red de distribución mundial para aportar a laboratorios que son verdaderamente de clase mundial.

Para conocer nuestra oferta completa de productos, especificaciones, catálogos, folletos, estudios de caso y lista de distribuidores, visite www.kewaunee.com o comuníquese directamente con su representante de ventas local.



Kewaunee, Alpha, Basic Bench, EarthLine, Enterprise, Evolution, Interceptor, Kemresin, Kewaunee Matrix, Research Collection, Signature, Sturdilite y Supreme Air son marcas comerciales registradas de Kewaunee Scientific Corporation



P.O. Box 1842 • Statesville, NC 28687-1842
 Teléfono: (704) 873-7202 • Fax: (704) 873-5160
 Correo electrónico: kscmarketing@kewaunee.com
 Sitio web: www.kewaunee.com

Kewaunee Labway India Pvt. Ltd.
 No. CA-9A, 2nd Floor, Jigani Link Road
 Jigani, Bangalore 562 106, India
 Teléfono: 9180-27826725 • Fax: 9180-27826724
 Sitio web: www.kewaunee.in

Kewaunee Labway Asia Pte. Ltd.
 194 Pandan Loop, #06-22
 Pantech Business Hub, Singapore 128 383
 Teléfono: 65-6773-0288 • Fax: 65-6773-2322

Kewaunee Scientific (Suzhou) Co Ltd
 333 Xingpu Road, Modern Industrial Square
 Building 4, Unit #2-A • Suzhou Industrial Park • China
 Teléfono: (0512) 6262 5090 • Fax: (0512) 6262 5089
 Sitio web: china.kewaunee.com