


TRUVIEW

Supreme Air | Kewaunee Scientific Corporation

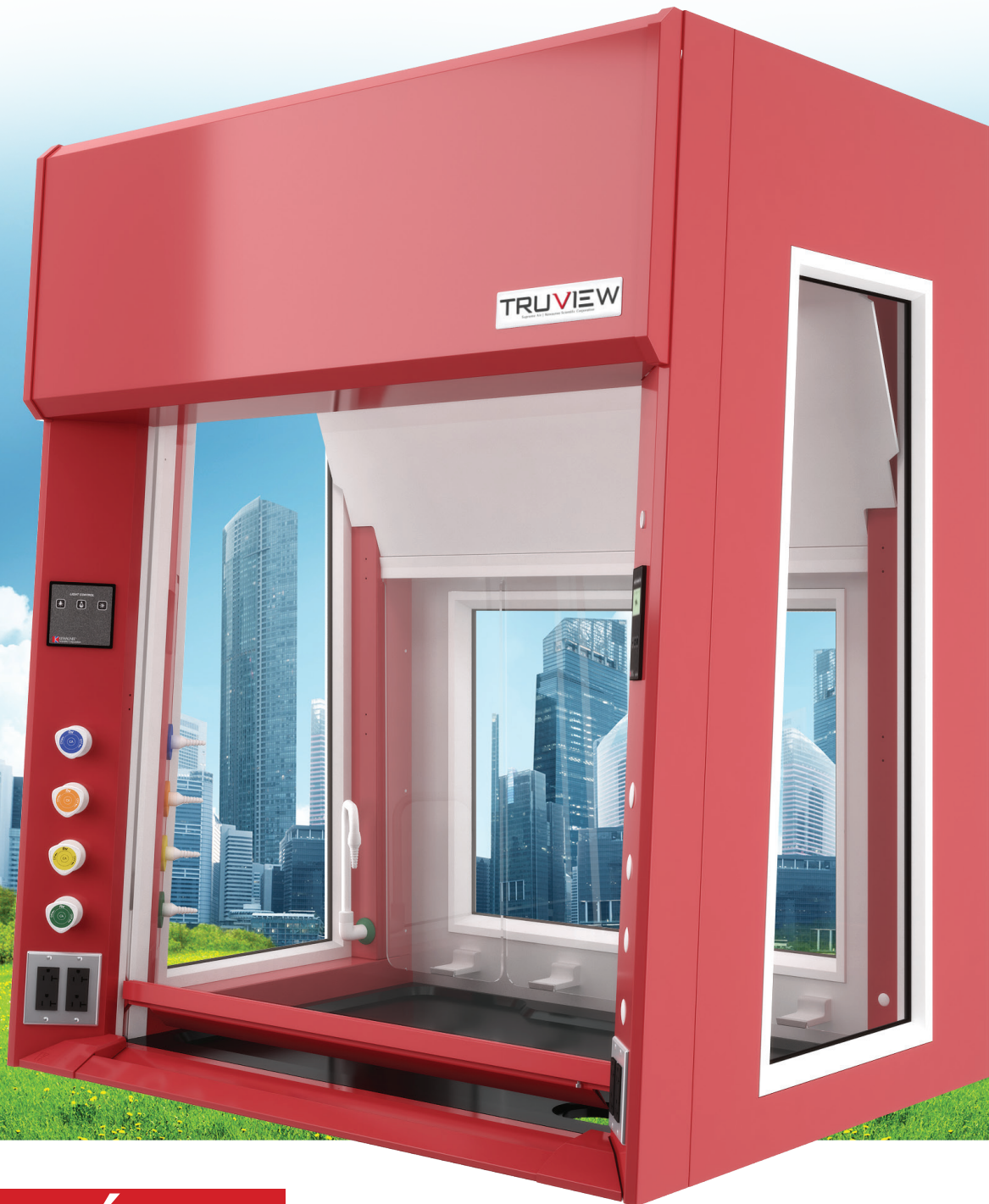

VISIÓN.

PARA EL FUTURO.



TRUVIEW

Supreme Air | Kewaunee Scientific Corporation


- » 38.5" de altura de visualización extra
- » Alcance arquitectónico completo de las configuraciones de diseño
- » Modelos que cumplen con la ley ADA, con hojas verticales y combinadas
- » 8 modelos para elegir: Estándar, ADA, doble cara, doble cara ADA
- » Funciona a tan solo 60 pies por minuto (según ASHRAE 110-2016) con un mayor ahorro de energía
- » Un alto rendimiento/bajo volumen de escape (LEV) genera mayores ahorros de energía
- » Sistema de hoja ultrasuave con puente de contrapeso antideslizante para una mejor protección del usuario

DISEÑE SU ESPACIO IDEAL CON MÁXIMA VISIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD



- » Vidrio de 360°
- » Opciones de parte posterior y lateral sólidas
- » Combinaciones que comparten paneles de ventana
- » No hay espacios entre las unidades para una fácil limpieza



ESPALDA CON ESPALDA (V55 - V56 - V57 - V58)


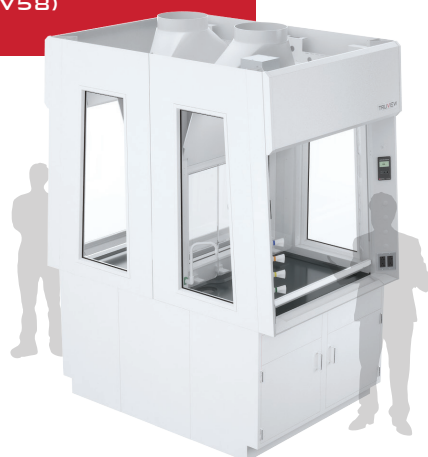


LADO A LADO (V50 - V51 - V52 - V53)

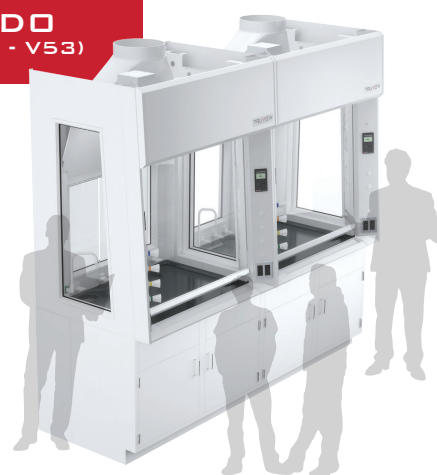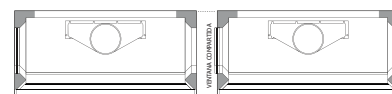

CONFIGURACIONES DE CAMPANA

COMBINACIÓN CUÁDRUPLE (V55 - V56 - V57 - V58)

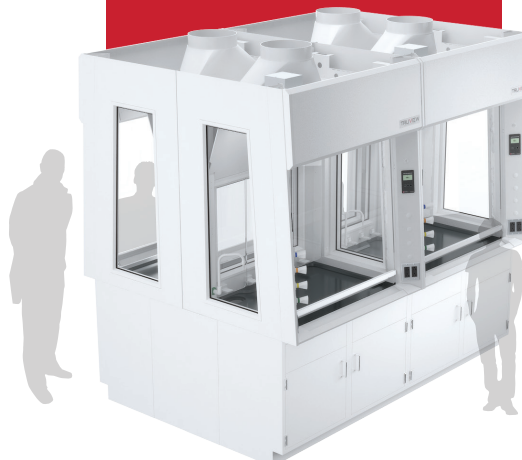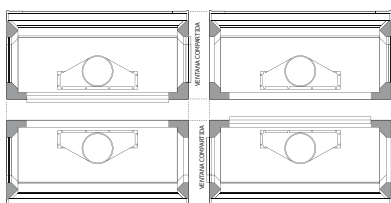


VENTURI

» El puerto Venturi acelera el flujo de aire en las esquinas inferiores de la abertura de la campana.

Patente pendiente



Dynamic Barrier Upper Bypass
for safe contaminate-free air curtain behind sash with minimal upper vortex roll

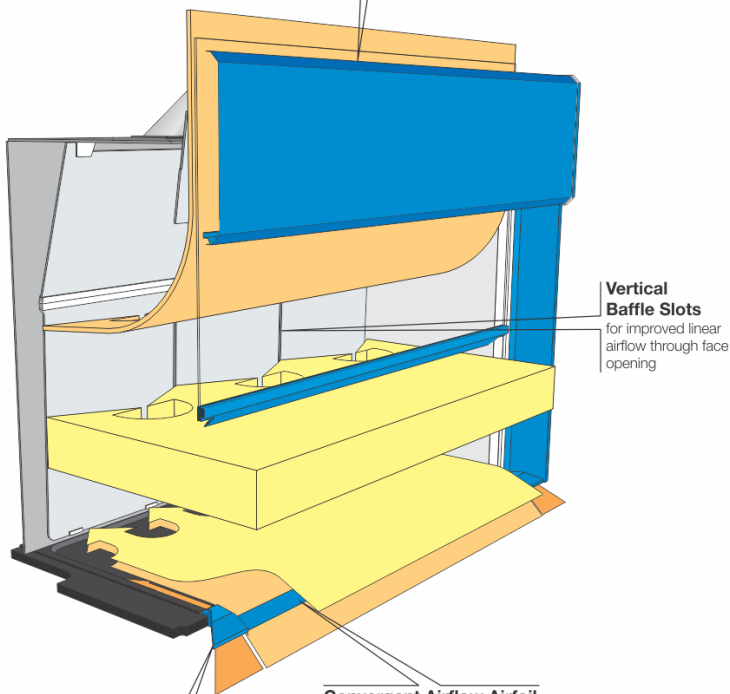

Vertical Baffle Slots
for improved linear airflow through face opening

Convergent Airflow Airfoil
flush mounted for easy access – provides sweeping airflow across the worksurface

VENTURI Port
accelerates the airflow in the lower corners of the hood opening for improved containment

- » Aerofil empotrado de vector doble
- » Manilla de hoja direccional
- » Diseño de poste con radio Venturi
- » Bypass superior de barrera dinámica
- » Deflectores cartesianos Venturi optimizados
- » Bypass de barrera dinámica Venturi patentado
- » Los postes aerodinámicos y el aerofil permiten un flujo de aire adecuado sin asistencia mecánica

NORMA ASHRAE 110 - 2016

7.3.3 Descargue un chorro de humo de la pequeña fuente de humo a lo largo de ambas paredes y la superficie de trabajo de la campana en una línea paralela a la cara de la campana y a 6 pulgadas (150 mm) de la cara de la campana, a lo largo de la parte superior de la abertura de la cara. Observe cuidadosamente la acción en las esquinas.

TRUVIEW

Supreme Air | Kewaunee Scientific Corporation



**MÚLTIPLES OPCIONES
DE ACCESORIOS**



**CONTROL LED
ATENUABLE**



PUERTOS VENTURI



**HAY COPAS DE
INSERTIÓN DISPONIBLES
EN TODAS LAS
SUPERFICIES DE
TRABAJO**



**MONITOR DE FLUJO
DE AIRE**



**VENTANAS Y
DEFLECTORES DE
VIDRIO**



**CANALES DE
ACCESORIOS DE
PLOMERÍA/SERVICIO**



**MANILLA DE HOJA CON
MUESCAS PARA CABLES**


CARACTERÍSTICAS AGRADESABLES PARA EL USUARIO FINAL

- » Dos enchufes dúplex protegidos con GFCI
- » Tubería instalada y precableado disponible
- » Panel interior desmontable para el acceso de accesorios
- » Deflectores traseros desmontables para una fácil limpieza
- » Sistema de correa y polea con ajuste preciso probado para hasta 400,000 ciclos
- » Línea de visión consistente para los modelos estándar y accesible (ADA)
- » Iluminación LED ajustable con 15 intensidades y 3 temperaturas de color

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Aprobado por UL 61010-10 y UL 1805
- » Hoja automática disponible en modelos de hoja vertical
- » Cerramientos de techo/Racks de destilación disponibles en todos los tamaños
- » Compatible con alarma o controlador VAV
- » Líneas de plomería flexibles para una fácil instalación en campo

TIPOS DE CAMPANA EXTRACTORA TRUVIEW




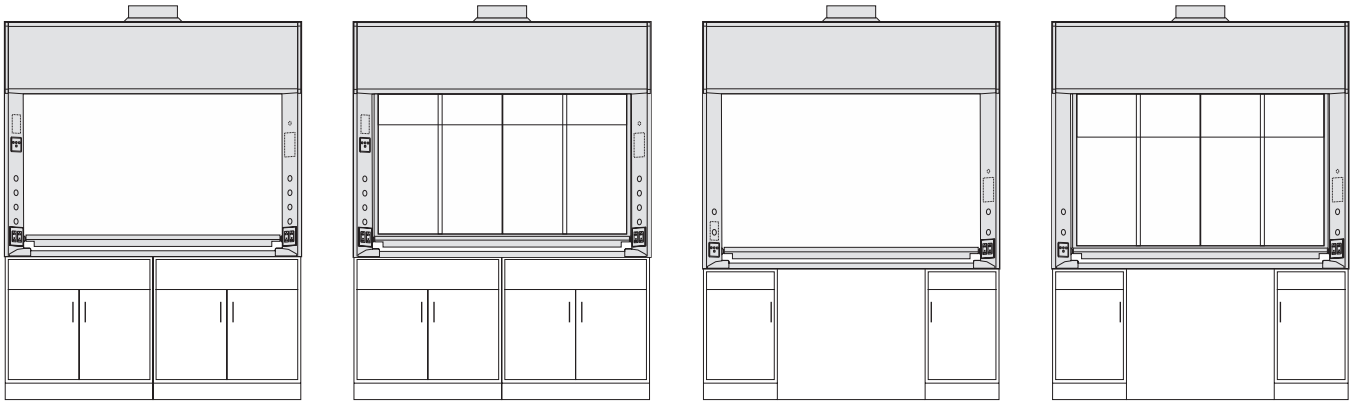


V50




V51

V52 - ADA

V53 - ADA

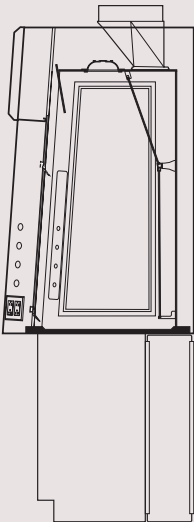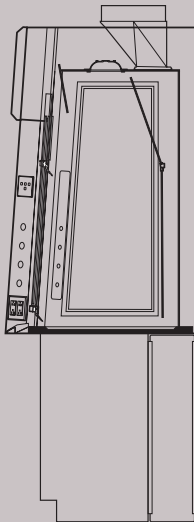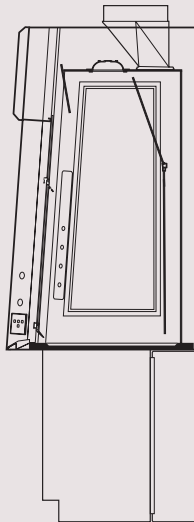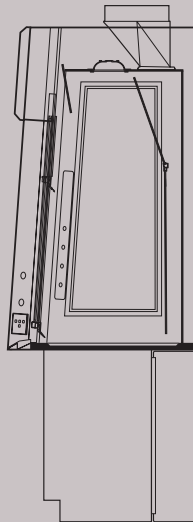	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja
Hoja vertical	•		•	•
Hoja de combinación		•		•
	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento
Kemglass	•	•	•	•
	Configuraciones de campana	Configuraciones de campana	Configuraciones de campana	Configuraciones de campana
Paneles de extremo: SA/LE/RE/AD	•	•	•	•
Paneles de extremo: SA/EU	•	•	•	•
Panel trasero de vidrio	•	•	•	•
Panel trasero sólido		•	•	•
Alturas de apertura de la hoja	28"	31"	28"	31"
Profundidades internas	24"	24"	24"	24"
Longitudes generales	48" - 60" - 72" - 96"	48" - 60" - 72"	48" - 60" - 72" - 96"	48" - 60" - 72" - 96"
Altura general	57"	57"	60"	60"
				

TIPOS DE CAMPANA EXTRACTORA TRUVIEW

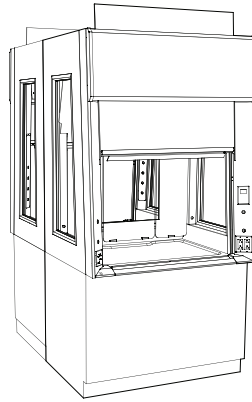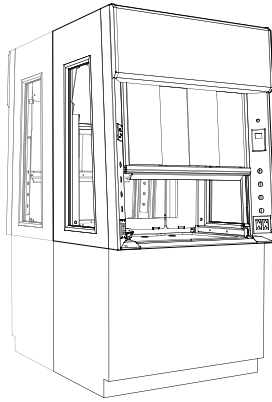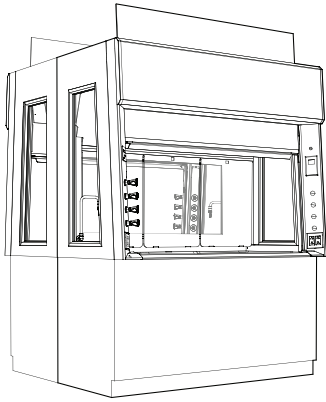

V55 - Doble cara

V56 - Doble cara

V57 - Doble cara - ADA

V58 - Doble cara - ADA

Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja	Configuraciones de hoja
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

•

•

•

•

Hoja vertical

Hoja de combinación

Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento	Opciones de revestimiento
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

•

•

•

•

Kemglass

Configuraciones de campana	Configuraciones de campana	Configuraciones de campana	Configuraciones de campana
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

•

•

•

•

Paneles de extremo: SA/LE/RE/AD

Paneles de extremo: SA/EU

Panel trasero de vidrio

Panel trasero sólido

28"

31"

28"

31"

Alturas de apertura de la hoja

48"

24"

48"

24"

Profundidades internas

48" - 60" - 72" - 96"

48" - 60" - 72"

48" - 60" - 72" - 96"

48" - 60" - 72" - 96"

Longitudes generales





57"

57"

60"

60"

Altura general

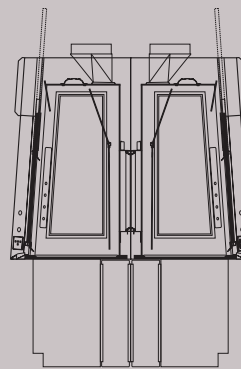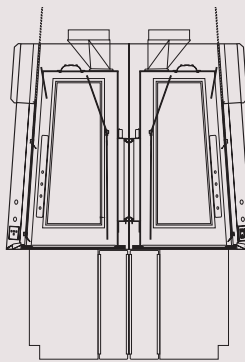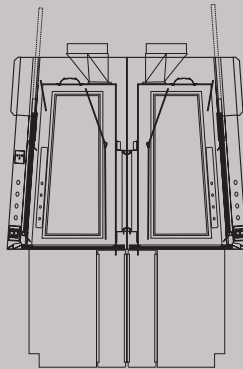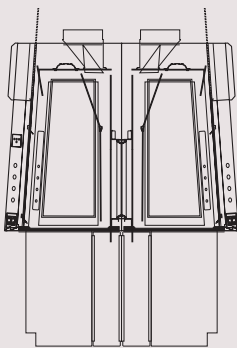

Kewaunee Scientific Corporation se dedica a fabricar productos de alta calidad para el mercado de laboratorios. Ofrecemos soluciones de laboratorio totales, diseños innovadores y experiencia tecnológica a través de una red de distribución mundial para aportar a laboratorios que son verdaderamente de clase mundial.

Productos de laboratorio de Kewaunee®:

ALPHA® – Sistema de trabajo adaptable

Columnas ALPHA – Estaciones de trabajo expandibles

Sistemas portadores superiores ALPHA

BasikBench® – Banco de patas en C soldado

DetectAir – Campanas extractoras filtradas/sin ductos

Enterprise® – Estaciones de trabajo móviles

Evolution® – Estaciones de trabajo basadas en columnas

Interceptor® – Gabinete de seguridad biológica

Interceptor® – Gabinete de flujo laminar

Kemresin® – Mostradores y fregaderos de resina epoxi

Kewaunee Matrix® – Estaciones educativas

Research Collection® – Mobiliario de acero

Serie Signature® – Mobiliario de madera

Spektrum – Carpintería arquitectónica laminada

Sturdilite® – Sistema de pedestal flexible

Supreme Air® Venturi – Campanas extractoras

Para conocer nuestra oferta completa de productos, especificaciones, catálogos, folletos, estudios de caso y lista de distribuidores, visite www.kewaunee.com o comuníquese directamente con su representante de ventas local.



Kewaunee, Alpha, BasikBench, EarthLine, Enterprise, Evolution, Interceptor, Kemresin, Kewaunee Matrix, Research Collection, Signature, Sturdilite y Supreme Air son marcas comerciales registradas de Kewaunee Scientific Corporation.



P.O. Box 1842 • Statesville, NC 28687-1842
Teléfono: (704) 873-7202 • Fax: (704) 873-5160
Correo electrónico: kscmarketing@kewaunee.com
Sitio web: www.kewaunee.com

Kewaunee Labway India Pvt. Ltd.
No. CA-9A, 2nd Floor, Jigani Link Road
Jigani, Bangalore 562 106, India
Teléfono: 9180-27826725 • Fax: 9180-27826724
Sitio web: www.kewaunee.in

Kewaunee Labway Asia Pte. Ltd.
194 Pandan Loop, #06-22
Pantech Business Hub, Singapore 128 383
Teléfono: 65-6773-0288 • Fax: 65-6773-2322